


## LA BONNE PRATIQUE POUR EFFECTUER UNE CYTOLOGIE CERVICALE ET/OU UN TEST HPV

### 1 - UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES FLACONS PRÉCONISÉS PAR BIOPATH-OI

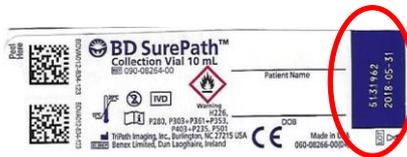

Flacon BD SurePath et CervexBrush

**Vérifiez la date de péremption** sur la tranche de l'étiquette du flacon.

NB : les informations sur les dates de péremption (Pot BD SurePath et dispositif Cervex Brush) sont reprises sur la boîte de matériel qui vous est livrée.

<b>BD SurePath x25</b>
Lot 9091872
Exp.31/03/2022
<b>Cervex Brush x25</b>
Lot 39335
Exp.01/05/2022

### 2 - LE PRÉLÈVEMENT

#### 1. Prélevez



- ✓ Appliquez le Cervex Brush au niveau de col
- ✓ Faire 3 tours à 360° en évitant le saignement

#### 2. Détachez



- ✓ Placez la tête détachable dans la plus large ouverture du flacon
- ✓ Tournez la tête du dispositif pour bloquer la brosse
- ✓ Tirez la tige délicatement vers le haut pour détacher la brosse

#### 3. Envoyez



- ✓ Identifiez avec le Nom/Prénom du patient
- ✓ Coller l'étiquette 2D sur la demande d'examen pour une meilleure traçabilité et envoyez le flacon au laboratoire



**Transmettre le pot avec la brosse détachable à l'intérieur pour un résultat optimal**

**Pour une identification correcte, il est impératif que le nom/prénom de la patiente soient indiqués sur le flacon et sur le bon de demande d'examen.**


### 3 - LA TRANSMISSION AU LABORATOIRE

Insérez le prélèvement dans le sachet transparent et la feuille de demande renseignée dans la pochette prévue à cet effet.

**! Un seul patient/sachet.**

## LA BONNE PRATIQUE POUR EFFECTUER UNE CYTOLOGIE CERVICALE ET/OU UN TEST HPV

### 1 - UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES FLACONS PRÉCONISÉS PAR BIOPATH-OI

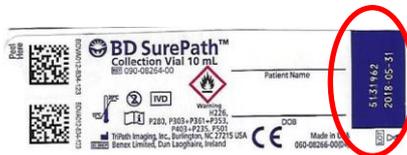

Flacon BD SurePath et CervexBrush

**Vérifiez la date de péremption** sur la tranche de l'étiquette du flacon.

NB : les informations sur les dates de péremption (Pot BD SurePath et dispositif Cervex Brush) sont reprises sur la boîte de matériel qui vous est livrée.

<b>BD SurePath x25</b>
Lot 9091872
Exp.31/03/2022
<b>Cervex Brush x25</b>
Lot 39335
Exp.01/05/2022

### 2 - LE PRÉLÈVEMENT

#### 1. Prélevez



- ✓ Appliquez le Cervex Brush au niveau de col
- ✓ Faire 3 tours à 360° en évitant le saignement

#### 2. Détachez



- ✓ Placez la tête détachable dans la plus large ouverture du flacon
- ✓ Tournez la tête du dispositif pour bloquer la brosse
- ✓ Tirez la tige délicatement vers le haut pour détacher la brosse

#### 3. Envoyez



- ✓ Identifiez avec le Nom/Prénom du patient
- ✓ Coller l'étiquette 2D sur la demande d'examen pour une meilleure traçabilité et envoyez le flacon au laboratoire



**Transmettre le pot avec la brosse détachable à l'intérieur pour un résultat optimal**

**Pour une identification correcte, il est impératif que le nom/prénom de la patiente soient indiqués sur le flacon et sur le bon de demande d'examen.**

### 3 - LA TRANSMISSION AU LABORATOIRE

Insérez le prélèvement dans le sachet transparent et la feuille de demande renseignée dans la pochette prévue à cet effet.

**! Un seul patient/sachet.**